

**DESCRIPCIÓN.**

Columna rígida para montaje a nivel de techo, encargada de suministrar los sistemas de gases medicinales, así como los sistemas eléctricos en quirófano.


CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **CUERPO:** Tiene una forma rectangular, fabricado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 y un acabado en pulido #3. Cuenta en uno de sus costados con una puerta que permite tener un acceso rápido al interior de la columna.
- ✓ **CABEZAL:** Tiene una forma de prisma el cual facilita y eficiente la conexión de gases medicinales, así como de los servicios eléctricos configurados.
- ✓ **CONFIGURACIÓN:** Las salidas de gases medicinales y de los servicios eléctricos son determinados por el cliente.
- ✓ **TOMAS DE GASES MEDICINALES:** Se puede configurar hasta con 12 diferentes gases servicio.
- ✓ **TOMAS ELÉCTRICAS:** Se colocan en cualquiera de los cuatro costados del cabezal prismático y pueden contener un máximo de 5 tomas eléctricas, ya sean centros de potencia aislados, receptáculos de tierra y eléctricos, tomas para datos y ganchos de soporte de suero intravenoso.
- ✓ **CANALIZACIONES:** separan lo sistemas de gases medicinales y sistemas eléctricos conforme al cumplimiento de la NFPA-99. Además de contar con mangueras de acero inoxidable revestidas con pvc.
- ✓ **CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX** grado hospital 127v. 20a color rojo con certificado de calidad internacional y nacionales como NOM, ANCE y UL
- ✓ **CONTACTO SENCILLO** para 220v de ½ vuelta para rayos x.
- ✓ **TOMAS.** Para gases medicinales de aire, oxígeno y vacío cumplen con los certificados de calidad internacional otorgados por la norma NFPA actual y UL marca y tipo opcional (el tipo y las cantidades de toma van de acuerdo a proyecto).





Dimensiones

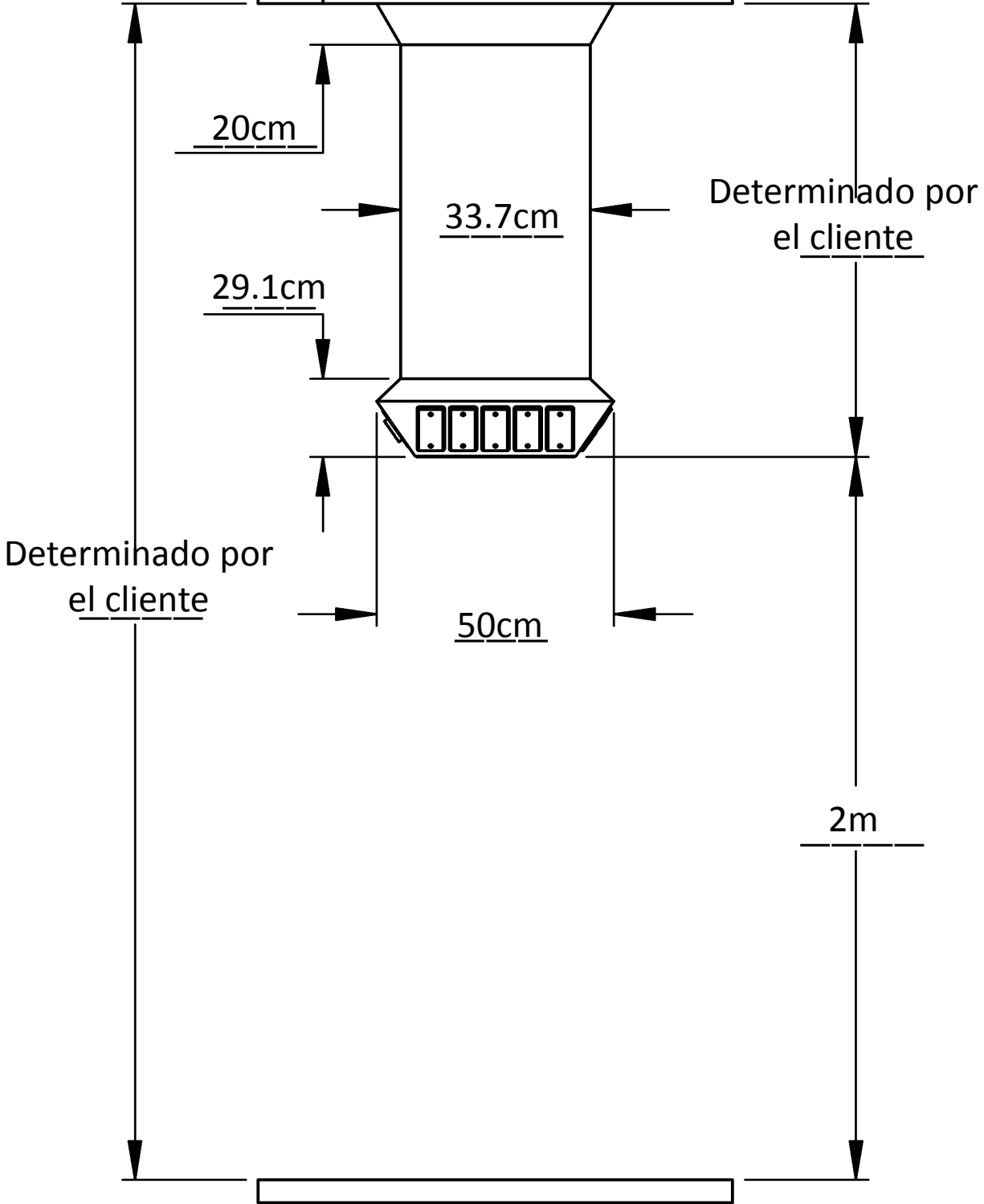

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856

www.seisamed.com