



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **ESTRUCTURA** de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- ✓ **BATERÍA DE SOPORTE** la mesa puede operar de manera continua hasta por 1 hr.
- ✓ **DOS MODOS DE CONTROL**, uno es un panel y el otro es un control alámbrico, provistos de un auto-bloque que se activa después de 1 minuto de inactividad, son capaces de responder (rápidamente en caso de emergencia).
- ✓ **CUMPLE CON REQUERIMIENTOS PARA RAYOS X**. La colchoneta puede ser usada en rayos X .
- ✓ **SISTEMA DE MOVIMIENTO** es realizado a través de un sistema hidráulico , facilitando el movimiento y frenado de las secciones.
- ✓ **BOTÓN DE REINICIO**, el cual se recomienda accionar después de cada operación.
- ✓ **PARTES OPCIONALES**. Cuenta con múltiples partes y accesorios que pueden ser configurados de acuerdo a los requerimientos del cliente.

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com



DISPLAY CON LAS POSICIONES DE LA MESA.



MESA ARRIBA



MESA ABAJO



TRENDELEBURG



TRENDELEBURG INVERSA

SISTEMA DE AUTO-BLOQUE EQUIPADO EN EL MODELO OP850, LA CUAL ES UNA MEJORA CLÍNICA IMPORTANTE.

Una ves terminado el posicionamiento de la mesa con los controles y después de activado el auto bloqueo, el sistema entra en operación, lo cual permite prevenir los errores originados por un descuido en el bloqueo de la mesa. Por otra parte, si no hay ninguna operación en un minuto el controlador se apagará automáticamente para evitar errores de funcionamiento



INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA



INCLINACIÓN LATERAL DERECHA




PLACA TRASERA HACIA ABAJO

Con el botón de reinicio, la mesa recobra la posición horizontal, es recomendable hacerlo después de cada procedimiento.



PLACA TRASERA HACIA ARRIBA

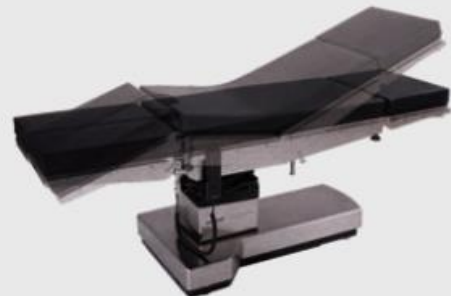

POSICIÓN FLEXIONADA



POSICIÓN SEMI-FLEXIONADA

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com



Sección de la cabeza y piernas arriba, abajo, con un rango de movimiento de 180°.



Tanto las secciones de las piernas como de la cabeza son desmontables e intercambiables, lo que sirve para poder tener una mayor área para los Rayos-X.



Incorpora un puente para los riñones y vesícula biliar, la cual no tienen ningún efecto negativo en los rayos x y permite un mejor soporte al operar dichas zonas.

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com



El material de la mesa es amigable con el medio ambiente, el cual tiene una radio lucidez excepcional en los Rayos-X.

Los 3 niveles rectangulares de la base de la mesa son de acero de alta calidad, cuentan con un tratamiento anti polvo, lo que facilita su limpieza. Su cilindro hidráulico patentado, garantiza un funcionamiento estable de la mesa.



MODELO: OP850

La duración de la batería de soporte totalmente cargada es de hasta 15 días, El conectar la mesa a la corriente AC, no mejora su funcionamiento, por lo que se sugiere que no este conectada durante su funcionamiento.



SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com




La mesa cuenta con dos tipos de controles.

Con el panel remoto y el control situado en la base de la mesa. Este sistema de control de posición quirúrgica doble, ofrece respaldo para el usuario y garantiza la seguridad del paciente.



Colchón de alta calidad, durable y fácil de limpiar. Cubierto con una textura suave y relleno con un material de memoria de forma, por lo que disminuye la aparición de úlceras durante la intervención

La mesa quirúrgica OP850 posee un colchón, hecho de material de fibra tradicional de alta calidad, es de piel suave de propiedad biomédica importada de Alemania. El colchón esta hecho de un material tradicional, hecho por fibras y una sustancia llamada colofonia, la cual es básicamente sabia procesada de manera sintética, además de contener un nuevo material de memoria de forma, el cual mejora en gran medida su capacidad de adaptación a la forma del cuerpo y minimiza la aparición de llagas durante las cirugías. Es conductora de electricidad

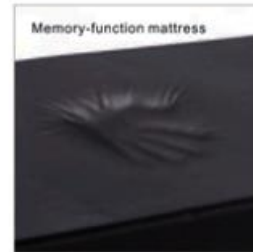

La mesa reúne diversos requerimientos respecto a las diferentes posiciones del cuerpo y es por eso que se usan soportes especializados.

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com



Soporte para pantalla de anestesia tipo "L"



Bloqueo.




Correa.



Soporte lateral.



Apoya brazos

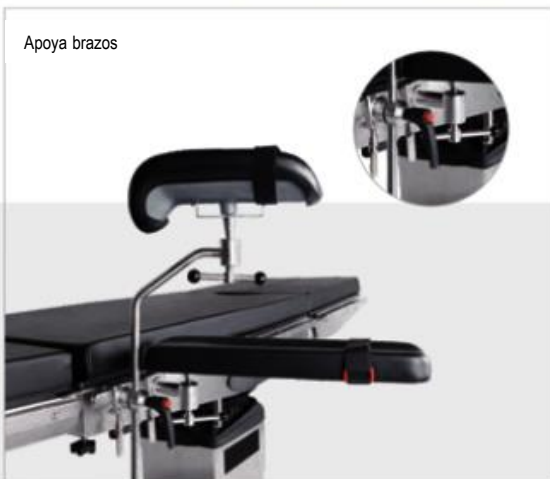


Apoya piernas





RANGO DE AJUSTES DE CADA SECCIÓN.

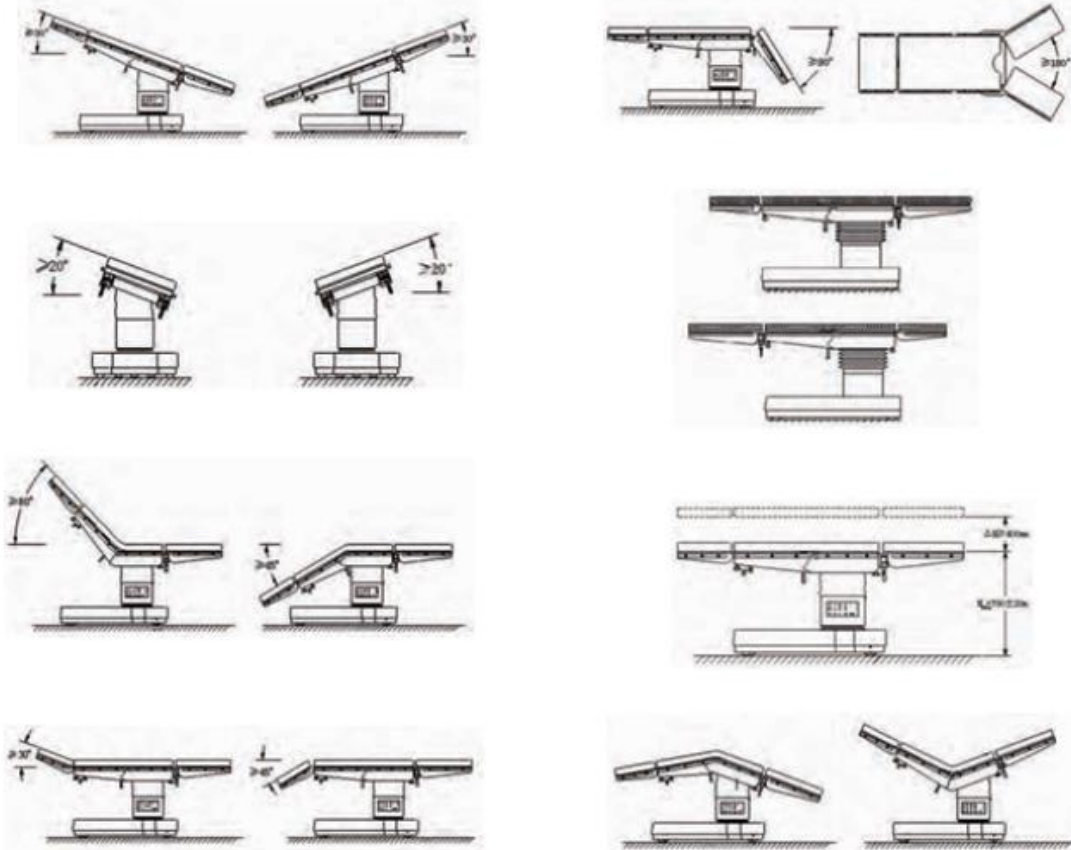

OP850 su alta calidad en su operación hidro-eléctrica, le permiten satisfacer los requerimientos Europeos, así como los de China. Gracias a su avanzada configuración de materiales de alta calidad. Su avanzada configuración, material de alta calidad, flexibilidad y un funcional sistema de operación, OP850 será la mejor opción y moderna para la sala de cirugía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO DE LA MESA	2020mm
ANCHO DE LA MESA	520mm
ALTURA DE LA MESA	700mm-1100mm
INCLINACIÓN/DECLINACIÓN DE LA POSICIÓN TRENDELENBURG	30°/30°
INCLINACIÓN LATERAL	20°/20°
ANGULO DE INCLINACIÓN/DECLINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL TORSO	80°/45°
ANGULO DE INCLINACIÓN/DECLINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LA CABEZA	30°/45°
INCLINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LAS PIERNAS	90°
ANGULO DE MOVIMIENTO ENTRE LOS SOPORTES DE LAS PIERNAS	180°
ANGULO DE LA POSICIÓN DE FLEX Y SEMI FLEXIÓN	20°/120°
ALTURA DE LA SECCIÓN DE LOS RIÑONES	128mm
CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN	90V-264V AC 50/60Hz
CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO	24V DC 12AH

SEISAMED

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856

www.seisamed.com